

Mintavételi útmutató vizelettenyésztés vizsgálatához

A bórsav tartalmú vizeletes cső alkalmazásának célja, hogy meggátolja a vizeletben lévő baktériumok szaporodását ezáltal megőrizze a vizeletben jelen levő baktériumok eredeti csíraszámát.

Vizsgálatra felkészülés: A húgycsőnyílás környékét mosakodószerrel alaposan tisztítsa meg.

Minta: reggeli első, középsugaras vizelet

FONTOS! Középsugaras vizelet: A vizeletsugár első harmadát a WC-be ürítse, ezt követően törlést használni nem szabad. A középső adagot az előre odakészített vizeletgyűjtő pohárba engedje, ügyelve arra, hogy kézzel az edény belső felszínét ne érintse meg. A maradék vizeletet ürítse a WC-be.

Szükséges mintamennyiség: legalább félig szükséges tölteni vizelettel a vizeletgyűjtő poharat. A pohárból a bórsavas csőbe a „Mintagyűjtés menete” lépései alapján juttassa át a vizeletmintát.


Minta tárolása: A mintát mihamarabb a vizsgálatot végző laboratóriumba kell továbbítani. Szükség esetén szobahőmérsékleten 24-48 óráig tárolható. A mintát lefagyasztani nem szabad.

Mintagyűjtés menete:

1. Csavarja le a BD Vacutainer® vizeletgyűjtő pohár (Product Catalogue Number: 364941, 120 ml) kupakját és végezze el a mintavételt.
2. A minta továbbítása a bórsavas vákuumos csőbe (BD Vacutainer® Plus C&S Boric Acid Sodium, Product Catalogue Number: 364955, 10 ml):
 - a. A vizeletgyűjtő poharat egy tiszta, sima felületre helyezze. Meg is lehet dönteni, ha a minta mennyisége korlátozott.
 - b. Húzza le a címkét a fedélről, hogy hozzáférjen a fedélbe épített vizelettovábbító eszközhöz (tű).

FONTOS: A fedélen lévő címkét biztonsági okokból kizárólag a mintavételi cső felhelyezése előtt távolítsa el!

 - c. Dugóval lefelé nyomja a tűre a csövet, hogy az átszúrja a dugót.
 - d. Tartsa ebben a helyzetben a csövet, amíg meg nem telik.
 - e. Húzza le a csövet a fedélben lévő vizelettovábbító eszközről.
 - f. 8-10 alkalommal forgassa át a csövet.
 - g. Ha másik csövet is meg kell töltenie, akkor ismétlje meg a c–f lépéseket.
 - h. Helyezze vissza a címkét a fedélben lévő vizelettovábbító nyílásra, és ragassza rá. A címke visszahelyezésekor óvatosan járjon el, nehogy megszúrja a tű.

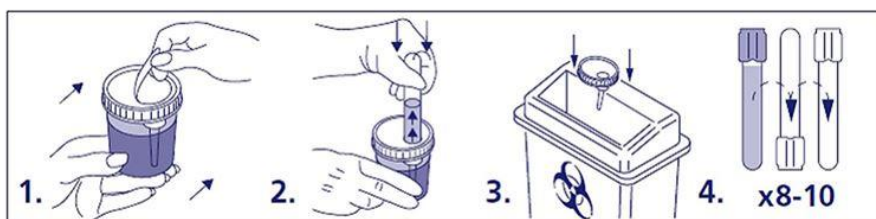

3. A laboratóriumba történő szállításhoz lássa el a megfelelő azonosító adatokkal a csövet/csöveket.
4. A vizeletgyűjtő pohár csavaros fedelét a biológiailag veszélyes éles eszközök tárolására szolgáló tartóban ártalmatlanítsa.