


ZONULIN SZÉKLET MINTAVEVŐ

ZONULIN MENNYISÉGI VIZSGÁLATHOZ

A zonulin széklet mintavevő jelenleg forgalomban lévő legfejlettebb és legpontosabb eszköz a laboratóriumi vizsgálathoz szükséges megfelelő mennyiségű széklet összegyűjtésére. A mintavevő eszközt a felhasználásig szobahőmérsékleten kell tárolni. A mintavevő egy speciális csőből és egy kifejezetten erre a célra kialakított hét, vízszintes barázdával ellátott mérőpálcából áll a minta gyűjtéséhez. A speciális kialakítás lehetővé teszi az egyszerű felhasználást, bármilyen típusú székletre is van szó.

A székletminta összegyűjtése után a pálcát a kék, tölcészerű szeparátorba/elválasztóba kell helyezni, amely a felesleges – méréshez nem szükséges – mintamennyiséget magában tartja. Így már csak a megfelelő mennyiségű széklet (csak az erre a célra kialakított speciális barázdákban összegyűlő 15 mg-nyi) kerül a csőbe.

A helyes mintavétel folyamata

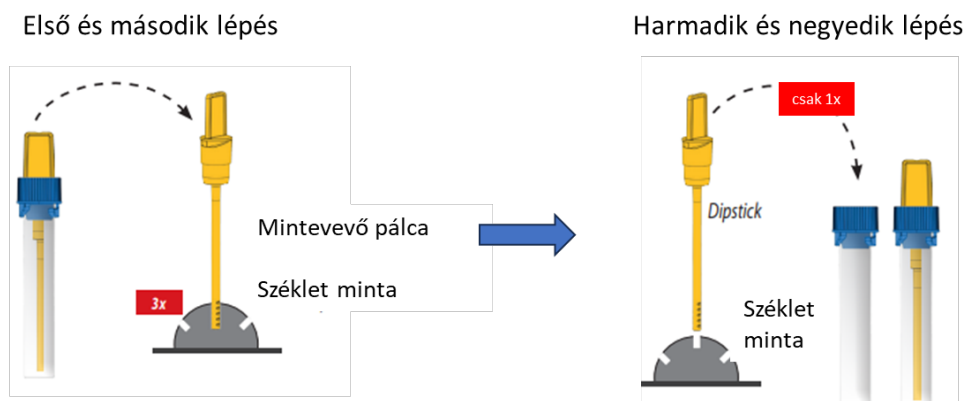

1. Széklet felfogásához használjon papír mintagyűjtő alátétet.
FONTOS! A teszt eredményét befolyásolhatja, ha a végécésésében lévő szagtalanító/fertőtlenítő szerrel érintkezik a székletminta.
2. Csavarja le a mintagyűjtő cső tetejét. A kupakhoz csatlakoztatott pálcát dugja a székletbe három különböző helyen, kb. 2 centiméternyire (ameddig „recés, fogazott” a vége).
FONTOS! A kék kúp alakú betét a csövön marad.

Húzza ki a pálcát a székletből és tegye vissza a mintagyűjtő csőbe (a csavaró mozdulatok következtében a mintafőlönség a speciálisan kialakított illeszték tetején marad).

FONTOS! Csak egyszer dugja vissza a mérőpálcát a mellékelt széssel együtt a mintacsőbe. A felesleges anyagot a kúp alakú betét eltávolítja, így 15 mg minta marad a csőbe.

A minta csak a megfelelően kivitelezett mintavétel esetén dolgozható fel. Amennyiben a mintavétel napján nem tudja eljuttatni a mintát a laboratóriumba, a minta legfeljebb **4 napig hűtve (2-8°C) szobahőmérsékleten 2 napig tárolható.**

Hölgyeknél kerülni kell a menstruáció alatti mintavételt. Folyékony széklet nem alkalmas a vizsgálatra.