

MINTAVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZEROLÓGIAI VIZSGÁLATOKHOZ


Vérből végezhető szerológiai vizsgálatok



- Mintavételi eszköz:** BD Vacutainer Natív steril vérvételi cső, szeparáló géllal, alvadás gyorsító adalékkal, 8,5 ml-es
- Mintatípus:** Teljes vérből véralvadás után centrifugálással nyert szérum (Centrifugálás előtt mintavételtől számítva legalább 30 percet szükséges várni a teljes alvadás bekövetkeztéig)
- Vizsgálatok/tárolás:** Szerológia, ellenanyag és antigénkimutatás vérből
- A csöveket legalább két betegazonosítóval szükséges ellátni.
A mintával telített csövet lefagyasztani nem szabad.
A mintavétel után legkorábban fél óra múlva, de legkésőbb 1 órán belül centrifugálni kell, ezután hűtve (+4 °C) tárolható maximum 48 óráig.
- A minta centrifugálás után a lehető leghamarabb hűtve (+4 °C-on) szállítandó a laboratóriumba.
- Centrifugálás: 4000 rpm, 3 percig.

Cikkszám (SYNLAB Hungary Kft.-től történő rendelés esetén): 367953 géles vérvételi cső, 8,5 ml

További mintavételi eszközök

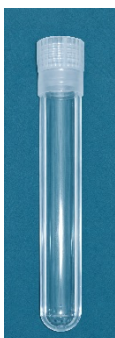

- Mintavételi eszköz:** Műanyag cső (75 × 13 mm) 5 ml, kupakkal
- Mintatípus:** Szérum centrifugálás utáni elválasztásához, tárolásához.
- Vizsgálatok/tárolás:** Szerológia, ellenanyag és antigénkimutatás vérből
- A csöveket legalább két betegazonosítóval szükséges ellátni.
A mintát a lehető leghamarabb a laboratóriumba kell juttatni.
Amennyiben ez nem megoldható, a minta maximum 48 óráig hűtve (+4 °C) tárolható. Ha a szállítás csak később lehetséges, a szérum -20 °C-on tárolandó és szállítandó.

Cikkszám (SYNLAB Hungary Kft.-től történő rendelés esetén): 55.475 PS cső, 5 ml (75 x 13 mm) | 65.724 kupak